

2. Preparering af kaviteten

Preparer kaviteten efter standardtekniker. Præparer forsigtigt med et elektrisk luft. Bemærk: Ved pulsvaskning anvendes calciumhydroxid.

3. Bonding

Brug et lysfølsomt bindings-system (fx: Gremio BOND, G-ensial® Bond eller G-BOND® for et bonde Essentia til emaljen/ dentinen.

4. Placering af Essentia Masking Liner

- Hold sprøjten lodret og fjern skrueretten ved at dreje imod uret. Påsæt sprøjtespidsen på sprøjten ved at dreje med uret.
- Forsigtigt presses plastmaterialet ud udenfor mundrummet så sikrer, at dispenseringsspidsen sidder forsvarligt fast til sprøjten, inden det presses ud i kaviteten. For at fjerne luft fra dispenseringspidsen presser du på sprøjten med spidsen pegende lige op i luften, indtil materialet når mündingen af spidsen.

Bemærk: Hvis der er luft i inden dispenseringspidsen, vil der komme luft i mellem materialet og den underliggende tandvæv. Når du injicerer. 3) Placer dispenseringspidsen så tæt som muligt på kavitetens og pres langsomt på stemplet for at injicere materialet ned. Alternativt kan materialet påføres på et blændingsblok. Placer materialet i kaviteten med et passende instrument.

4. Universal farver og Opalescent Modifier

- Dispenserings farge en sprøjte
- Åbn sprøjtehatten og dispenser materialet ud på et blændingsblok/ blændeblok. Placer materialet i kaviteten med et passende instrument. Efter dispenserings skruet det muligt med uret 1/2 - tomgang for fri frigøre et respire ind til sprøjten. Så kan på umiddelbart efter brug
- Dispenser farge en (unintelligengsdosis) Indsæt Unitip en Unitip/Appliker (appliceringspipette). Der henvises til appliceringsinstruks og brugsanvisning. Fjern hatten og tryk materialet ud direkte i den præparerede kavitet. Brug af fast tryk.
- Modificer stains (Redbrun, Stort, Hvid)** Åbn sprøjtehatten og dispenser materialet på et blændeblok. Applicer materialet på dentinoverfladen eller emaljeoverfladen med en pensel eller et passende instrument.

Bestik, Modifikatorer og andre fargeværemidler: De bør altid deklares af end emaljeoverflader eller Opalescent modifier efter lyshærdning.

Bemærk:

- Masking Liner (maskeringsfarve) kan bruges til at mæskere misfarvninger i kavitebsubstansen.
- Dentin- og emaljefarver kan bruges til at opnå en æstetisk posterior restaurering i et enkelt lag.
- Dentin- og Emaljefarver skal bruges ud fra et to-lags koncept. Der henvises til brugsanvisning for andre detaljer.
- A kompositen kan med fordel mere på kaleskoter, således man opnår en mere fast komposit. Materialet skal bruges på et presse ud, hvis det benyttes umiddelbart efter kold opbevaring. LD materialet står et par minutter ved stuetemperatur før det anvendes.
- Anvendelse af en presstudieret maskering med en modelleringsvask, kan letteregere modelleringen af kompositen.
- Undgå eksposering af omgivende lys efter dispenserings. Omgivende lys kan forårske arbejdstid.


Kliniske tips

- A. Ved små kaviteter** Restaurer ved brug af et-lags-teknik. I de fleste tilfælde er Universal Shade tilstrækkelig. I tilfælde hvor en højere grad af transluciditet er nødvendig, kan vælges en kombination af Dentin og Emalje farve.

B. Store og dybe kaviteter

- I de fleste tilfælde er et to-lagsfarve-lag-teknik give det bedste æstetiske resultat. For at maskere misfarvet dentin brug Masking Liner og fortsæt med at bygge op med en passende dentin farve (Dentin og Emalje farver).

KLINISKE TIPS 4.1 – EKSEMPLER PÅ KLINISK APPLICERING:

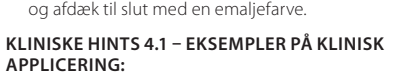

KLINISKE TIPS 4.2 – HOVED(PRINCIPI) FARVE KOMBINATIONER:

Kategori	Juvenil	Yngre	Adult	Senior	Posterior mono	Posterior duo
Dentin shade	Light	Medium	Dark	Dark	Dark	Dark
Enamel + Universal Shades	Light	Medium	Dark	Dark	Universal	Dark Dentin + Light Enamel
Masking Liner	ML	ML	ML	ML	ML	ML
Modifiers	OB	OB	OB	OB	OB	OB

c. Brug af Modifier Sprøje

- Essentia Modifier kan bruges til at tilføre opalescens i det incisale område ved at lægge en lille smule i emaljelaget.
- Redbrune, Stort og Hvide modifier er flydende "glitter" som bruges til at karakterisere restaureringerne.

5. Konturering før lyshærdning

Konturerer med standardtekniker. Hold lyslederen så tæt som muligt til overfladen. Der henvises til følgende tabel for bestrålningstid i hærdningsboks.

Lampens effektivitet og tilsvarende dybder af materiale

20 sek. Ildstrøm (Watt) (20000mW/cm²)	30 sek. Ildstrøm (Watt) (20000mW/cm²)
LD	LD
MD	MD
DD	DD
DE	DE
ML	ML
OB	OB

Bemærk:

- Materialet skal placeres og lyshærdes i lag. For maksimal lagtykkelse se venligst ovenstående tabel.
- En lavere lyshærdningsintensitet kan forårsage urettersk hærings og misfarvning af materialet.
- Finish og polering** Finish og poler med diamantbørstetudskæpper og skiver. For at opnå en høj glans kan der bruges poleringspasta.

FAVER

- Light (lys) Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark(mørk) Dentin
- LE: Light (lys) Enamel
- LE: Light (mørk) Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OB: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Stort Modifier
- WM: Hvid Modifier

OPBEVARING:

Det anbefales for optimal ydeevne at opbevare materielle i kold og mørk (4 - 25°C /39 - 77°F) Holdbarhed: 3 år fra fremstillingstid.

PÅKNINGEN

- Essentia Starter Kit Sprøje** - 7 sprøjter (1 for hver farge LD, MD, DD, LE, DE, U, ML) - 20 Dispenseringsspidsen III Plastic + 20 brugstilbehør
- Essentia Modifier kit** - 4 sprøjter: OM, RBM, BM, WM
- Essentia Sprøje Refill** - LD, MD, DD, LE, DE, U, OM, RBM, BM, WM: f. refill 1 sprøjte hver - ML:refill 1 sprøjte inkl. 20 dispenseringspidser III Plastic.

III. Utillipis

- Essentia Starter Kit Unitip** - 30 sprøjter (5 unitsips i hver) farge: LD, MD, DD, LE, DE, U
- 1 sprøjte ML** - 20 dispenseringspidser III Plastic + 20 brugstilbehør

- Essentia Unitip refill** - LD, MD, DD, LE, DE, U: f. refill af 15 unitsips

III. Accessories/tilbehør

- Essentia Farveguide/farvevalsk
- GC Unitip Appliér
- Dispenserings III Plastic
- Blændeblok (no. 148)

BEMÆRK

Vægt og volumen pr. sprøje:

Vægt / Volume	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Vægt	0,7 g	3,9 g	4,0 g	3,4 g	3,9 g	3,9 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Volume	0,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	2,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml

Vægt og volumen pr. Unitip (engangsdos):

Vægt	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Vægt	0,27 g	0,9 g	0,9 g	0,32 g	0,9 g	0,9 g	0,03 g	0,03 g	0,03 g
Volume	0,2 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,2 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,03 ml	0,03 ml	0,03 ml

ADVARSER:

- I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, fjern straks med vand eller en svamp opløst i alkohol. Skyl med vand. For en udvalgt kontakt med oral væv eller hud kan kofferdiam og kalciumhydroxid anvendes til at isolere arbejdsfeltet fra kontakt med øjne, skal straks vaskes med vand og sørg læge.
- Undgå at synke indlagte materialer.
- Inden brug på patienten, trykkes en lille smule ud på et blændeblok for at sikre at materialet flyder som forventet.
- Brug beskyttelses eller gummihandsker når materielle arbejdes for at undgå direkte kontakt med tilhørende resinlag for at forhindre mulig overførselsheld.
- Al infektionsmessige årsager er unitipis beregnet til engangsbrug.
- Brug lysbeskyttelsesbrille under lyshærdning.
- Brug en støvsuger (sug) og lav mundbånd når det polymeriseres med et passende potes for at undgå at inhalere støvpartikler.
- Blånd ikke med andre lignede materiale/polymerer.
- Undgå at få materialet på tøj.
- I tilfælde af utilsigtede kontakt med huden eller andre kropdel arbejdes fjernes dette med instrument, svamp eller vatpælle før lyshærdning.
- Brug ikke Essentia i kombination med eugenolbaserede kompositmateriale, såsom eugenol, som forhindrer Essentia i at binde.
- 31) Sjældne tilfælde kan forekomme forårsage overførselshedsreaktioner. Hvis sådanne overførselshedsreaktioner opstår, kan produktet ikke længere bruges til at isolere arbejdsfeltet fra kontakt med øjne, skal straks vaskes med vand og sørg læge.
- 14)Afor ikke dispenseringspidser med udtalte mængder af alkohol, da dette kan forårsage kontaminering af pastaen.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU'er er evt. klassificeret som farligt i henr. GHS. Hvis sådanne produkter er anvendt, skal der tages forholdsregler som kan findes på http://www.3m.com

Senest opdateret: 05/2019

patienten for at säkerställa att pastorna flödar ordentligt.

- Använd plast- eller latexhandskar under arbetet för att undvika direktkontakt med syrenbärigt litium i syfte att förhindra potentiellt sensitibilt.
- Inferktionkontrolltyfje är Unitip endast avsedda för engångsbruk.
- Använd skyddsglasögon i samband med lyshärdning.
- Använd salivskydd och skydda dig med ansiktsmask för att undvika inandning av damm i samband med polering av polymeriserat litium.
- Blånda inte med andra liknande produkter.
- Undvik att få materialet på kläderna.
- Indiend instrument, svamp eller bomullspapper för att avlägsna materialet i händelse av oavsiktlig kontakt med tandytter eller oavsiktliga konstruktioner.
- Essentia i kombination med eugenolhaltiga materialer eftersom eugenol kan förhindra korrekt polymerisation av Essentia.
- Övriga vanlig fakt och lysa individueller kan ge upphov till sensibilisering. Om sådana reaktioner uppvisas ska användningen avbrotts och patienten remitteras till läkaren.
- Essentia består i liten mängd alkohol för att torka av appliceringspistan. Överdrivna mängder kan orsaka kontamination av materialet.
- Vissa produkter som härvas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: http://www.3m.com

Senast uppdaterat: 05/2019

ANTENCIÓN DE UTILIZACIÓN Y MANEJO EN CASOS DE EMERGENCIA:

- Essentia[®]** Composito universal radiopaco fotopolimerizable para restauraciones. Para utilización exclusiva por un profesional siguiendo as indicaciones recomendadas. INDICACIONES: 1. Restauração direta de cavidades de classe I, II, III, IV e V. 2. Restauração direta de defeitos em forma de cunha e cavidades radiculares. 3. Restauração direta de f açetas e fechamento de diátramas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Capoeamentoulpilato.
- Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monômero de metacrilato ou ao polímero de metacrilato.
- Assagure que o dente a restaurar está limpo e não está desidratado.
- Primeiro, selecione uma tonalidade de esmalte olhando para o tecido incisivo do dente (vizinho). Com base no valor observado, selecione a tonalidade esmalte Light Enamel® (mais branco) ou Dark Enamel® (mais cinzento).
- Prósiga com a seleção da tonalidade da dentina, olhando para o tecido cervical do dente (vizinho).
- Com base no somatório observado (intensidade da cor), escolha entre Light Dentin® (baixo cromatismo), Medium Dentin® e Dark Dentin® (cromatismo médio).
- Em restaurações pequenas ou posteriores, a tonalidade Universal Shade irá adaptar-se à maioria dos casos.
- Para mascarar descolorações, aplique uma fina camada de Masking Liner sobre a descoloração.
- Preparar Cavidade

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Seleção de Tonalidades
- Assagure que o dente a restaurar está limpo e não está desidratado.
- Primeiro, selecione uma tonalidade de esmalte olhando para o tecido incisivo do dente (vizinho). Com base no valor observado, selecione a tonalidade esmalte Light Enamel® (mais branco) ou Dark Enamel® (mais cinzento).
- Prósiga com a seleção da tonalidade da dentina, olhando para o tecido cervical do dente (vizinho).
- Com base no somatório observado (intensidade da cor), escolha entre Light Dentin® (baixo cromatismo), Medium Dentin® e Dark Dentin® (cromatismo médio).
- Em restaurações pequenas ou posteriores, a tonalidade Universal Shade irá adaptar-se à maioria dos casos.
- Para mascarar descolorações, aplique uma fina camada de Masking Liner sobre a descoloração.
- Preparar Cavidade

Treatmento de Adesão

- Para ligar Essentia ao esmalte ou dentina, utilize um sistema de adesão fotopolimerizável como o G-Premio BOND, G-ensial® Bond ou G-BOND[®]. Siga as instruções do fabricante.
- Procedimento restaurador com Essentia**

Masking Liner

- Com a seringa na vertical, remover a tampa rodando no sentido oposto do relógio. Colocar imediatamente e de forma segura a ponta aplicadora na seringa rodando no sentido dos ponteiros do relógio.
- Antes de depositar o material, empurre suavemente o êmbolo da seringa para fazer um teste fora da boca e assegurar-se de que a ponta aplicadora está bem acoplada à seringa. Para eliminar o ar da ponta aplicadora, com a ponta virada para cima, empurre suavemente o êmbolo da seringa até o material chegar ao local da ponta.

Anteállítás

- Depositar com uma seringa
- Antes de tampa da seringa a deposite o material sobre uma placa de mistura. Deposite o material na cavidade utilizando um instrumento adequado ao procedimento restaurador. Depois de depositar o material, empurre o êmbolo da seringa meio volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para liberar a pressão residual no interior da seringa. Feche a tampa imediatamente depois da utilização.
- Dispensar com uma ponta Unitip

Corantes modificadores (Red-Brown, Black, White)

- Antes de tampa da seringa e deposite o material sobre uma placa de mistura. Aplique o material sobre a tonalidade Dentin ou Enamel com um pincel ou um instrumento adequado ao procedimento restaurador.

SUGESTÕES DE TRATAMENTO

- A no caso de cavidades pequenas** Restaure utilizando uma técnica de uma tonalidade. Na maioria dos casos, a utilização da tonalidade Universal será suficiente. Nos casos em que seja necessária uma maior translucididade, pode selecionar-se uma combinação de tonalidades Dentin e Enamel.
- B no caso de cavidades grandes ou profundas** Na maioria dos casos, os melhores resultados estéticos são obtidos com a técnica de aplicação por camadas com múltiplas tonalidades. Para mascarar dentina descolorida, utilize o Masking Liner e continue a reconstrução com uma tonalidade Dentin adequada. Depois cubra-a com uma tonalidade Enamel.

SUGESTÃO DE TRATAMENTO 4.1 – EXEMPLOS DE APPLICACIONES CLINICAS:

Tonalidades Dentin	LD	LE	DE	U
LD	LD	LD	LD	LD
MD	MD	MD	MD	MD
DD	DD	DD	DD	DD
DE	DE	DE	DE	DE
ML	ML	ML	ML	ML
OB	OB	OB	OB	OB
RBM	RBM	RBM	RBM	RBM
BM	BM	BM	BM	BM
WM	WM	WM	WM	WM

FÖRVARING

Rekomendation för bästa resultat: Förvara svart och mörkt (4 - 25 °C/39 - 77°F) Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

FÖRPACKNING

- Essentia Starter Kit Sprøje** - 7 sprøjter (en av varje farge LD, MD, DD, LE, DE, U, ML) - 20 Appliceringspidser III plast + 1 sprøjtestykke
- Essentia Modifier Kit** - 4 sprøje: OM, RBM, BM, WM
- Essentia Sprøje Refillpakning, sprøje** - LD, MD, DD, LE, DE, U: OM, RBM, BM, WM: refill med 1 sprøje
- ML:refill** med 1 sprøje og 20 appliceringspidser på 15 unitsip

III. Tilbehør

- GC Unitip appliceringspipette III
- Dispenserings III Plastic
- Blændingsblok (nr. 148)

OBST og volum for en sprøje:

Vægt	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Vægt	0,7 g	3,9 g	4,0 g	3,4 g	3,9 g	3,9 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Volume	0,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	2,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml

Vægt og volum for en Unitip:

Vægt	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Vægt	0,27 g	0,9 g	0,9 g	0,32 g	0,9 g	0,9 g	0,03 g	0,03 g	0,03 g
Volume	0,2 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,2 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,03 ml	0,03 ml	0,03 ml

VARNING

- Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna genast med bomull eller svamp indränkt i alkohol. Skölj med vatten. För en utvald kontakt kan kofferdiam och kalciumhydroxid användas för att isolera arbetsfeltet från hud och oral vävnad.
- Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten.
- 3) Vid kontakt med huden, tvätta av kontaktet område med vatten och se till att huden är helt ren.
- 31) Sjældne tilfælde kan forekomme forårsager overførselshedsreaktioner. Hvis sådanne overførselshedsreaktioner opstår, kan produktet ikke længere bruges til at isolere arbejdsfeltet fra kontakt med øjne, skal straks vaskes med vand og sørg læge.
- 14)Afor ikke dispenseringspidser med udtalte mængder af alkohol, da dette kan forårsage kontaminering af pastaen.

III. Tilbehør

- GC Unitip appliceringspipette III
- Dispenserings III Plastic
- Blændingsblok (nr. 148)

OBST og volum for en sprøje:

Vægt	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Vægt	0,7 g	3,9 g	4,0 g	3,4 g	3,9 g	3,9 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Volume	0,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	2,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml

VARNING

- Vid kontakt med oral vävnad eller hud, avlägsna genast med bomull eller svamp indränkt i alkohol. Skölj med vatten. För en utvald kontakt kan kofferdiam och kalciumhydroxid användas för att isolera arbetsfeltet från hud och oral vävnad.
- Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten.
- 3) Vid kontakt med huden, tvätta av kontaktet område med vatten och se till att huden är helt ren.
- 31) Sjældne tilfælde kan forekomme forårsager overførselshedsreaktioner. Hvis sådanne overførselshedsreaktioner opstår, kan produktet ikke længere bruges til at isolere arbejdsfeltet fra kontakt med øjne, skal straks vaskes med vand og sørg læge.
- 14)Afor ikke dispenseringspidser med udtalte mængder af alkohol, da dette kan forårsage kontaminering af pastaen.

CORES

- Light (lys) Dentin
- MD: Medium Dentin
- DD: Dark Dentin
- LE: Light Enamel
- DE: Dark Enamel
- U: Universal
- ML: Masking Liner
- OM: Opalescent Modifier
- RBM: Red-Brown Modifier
- BM: Stort Modifier
- WM: White Modifier

ARMAZENAMENTO

Para um desmembramento, recomenda-se o armazenamento local ao seco e fresco (4 - 25°C / 39 - 77°F). Prazo de validade em 30 dias a partir da data de fabrico.

EMBALAGENS

- Essentia Starter Kit Seringa** - 7 seringas (uma para cada tonalidade: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML) - 20 aplicadores III Plastic + 1 tampa de protecção contra a luz
- Essentia Modifier Kit** - 4 seringas: OM, RBM, BM, WM
- Essentia Sprøje Refillpakning, sprøje** - LD, MD, DD, LE, DE, U: OM, RBM, BM, WM: dispensar en recargas de 1 seringa cada ML: refill de 1 seringa, incluindo 20 pontas aplicadoras III Plastic

III. Utillipis

- Essentia Starter Kit Unitip** - 30 unitips (5 unitips para cada uma das 6 tonalidades: LD, MD, DD, LE, DE, U) - 20 sprøjtestykke
- 1 sprøjte ML** - 20 pontas aplicadoras III Plastic + 1 tampa de protecção contra a luz

II. Recursos Essentia Unitip

- GC Unitip Appliér
- Gua de tonalidades Essentia
- Ponta aplicadora III Plastic
- Pasta de mistura (no. 148)

NOTAS

Peso e volume por seringa:

Peso	LD	LE	DE	U	ML	OB	RBM	BM	WM
Peso	0,7 g	3,9 g	4,0 g	3,4 g	3,9 g	3,9 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Volume	0,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	2,6 ml	3,0 ml	3,0 ml	0,2 ml	0,2 ml	0,2 ml

Peso e volume por unitip:

Peso	LD	LE	DE	U
Peso	0,27 g	0,9 g	0,9 g	0,32 g
Volume	0,2 ml	0,7 ml	0,7 ml	0,2 ml

CAUIDADO

- Evitar o contacto com a mucosa oral ou pele, retirar imediatamente com algodão ou uma esponja embebidos em álcool. Lave com água.
- Em caso de contacto, lavar com um dque de água e sabão imediatamente.
- Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
- Para mascarar descolorações, aplique uma fina camada de Masking Liner sobre a descoloração.
- Preparar o produto para ser aplicado, limpe o campo operatório da pele e mucosa oral.
- Antes de iniciar o processo de aplicação, pruebe o material fora de la boca do paciente, para garantir que a seringa funciona corretamente.
- Utilize luvas de plástico ou de borracha durante a operação, para evitar o contacto direto com camadas de resina embebida pelo ar, a fim de evitar uma possível reação de sensibilidade.
- Por motivos de controlo de infecções, as unitips são de utilização única.
- Use cuidados de protecção durante a aplicação.
- Para mascarar descolorações, aplique uma fina camada de polimento do material polimerizado, use um aspirador e uma máscara de protecção para evitar a inalação do pó produzido durante o processo.
- Não misturar com outros produtos semelhantes.
- Evite contaminar o vestuário com o material.
- Em caso de contacto com o resto do corpo, lavar imediatamente com água e sabão.
- Se houver contacto com o material, remova com um instrumento, esponja ou bola de algodão antes da fotopolimerização.
- Não utilize Essentia em combinação com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol pode prejudicar a polimerização do Essentia.
- Em caso raro, o produto pode provocar reacções alérgicas, incluindo reacções graves. Caso se observem reações desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.
- Não limpar a ponta aplicadora com excesso de álcool, pois isto pode contaminar a pasta.
- Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS.
- Para obter mais informações sobre as características de segurança disponiveis em: <http://www.3m.com/pt>

Última revisão: 05/2019

Прочтите эти инструкции перед началом использования:

Essentia[®]

Фотополimerизуемая оптоактивная смолы для прямой литации. Дистрибутор: пружинный шприц 15 мл. Содержит литий в форме литиоакрилатов. Предназначено для применения только специалистом в стоматологии. Не использовать для реставрации зубов.