

Línea NATURE-CRYL™

Para Base de Prótesis
4 Materiales - 7 Tonos Estandarizados



la Belleza la Fuerza y la Naturaleza



Línea NATURE-CRYL™

La línea NATURE-CRYL™ consiste en 4 acrílicos - 2 de alto impacto, un acrílico de autocurado y el novedoso acrílico de curado en microondas. Por primera vez una marca de acrílicos que responde a todas las necesidades del paciente, el dentista y el laboratorista. Cada uno de los acrílicos NATURE-CRYL™ están disponibles en un sistema armonizado de 7 tonos. Finalmente, se encuentra con un sistema utilizado en cualquier técnica con la confianza de un rango de tonos estandarizados.

- Sistema de 4 Materiales
- Excelentes Propiedades Físicas
- 7 Tonos Estandarizados
- Fácil de Terminar y Pulir
- Última tecnología
- Ajuste Exacto

Resistencia tan Alta es Irresistible


NATURE-CRYL™ SUPER HI-IMPACT

Acrílico para Base de Prótesis de Alto Impacto



NATURE-CRYL™ SUPER HI-IMPACT es un material de alto impacto para prótesis. Tiene resistencia al impacto superior que supera todos los requisitos de las resinas y dentaduras de Clase 1 basados en el mercado hoy en día. Este producto es libre de cadmio y ofrece hasta 20 minutos de tiempo de trabajo. NATURE-CRYL™ SUPER HI-IMPACT resiste roturas, es de fácil acabado y pulido, con un conveniente curado de 2 horas de calentamiento y/o curados durante la noche y tiene propiedades físicas superiores.

- Alta Resistencia a Rupturas
- Fácil de Terminar y de Pulir
- Propiedades Superiores
- Ajuste Exacto
- Conveniente Curado 2 horas
- Tipo 1 Clase 1

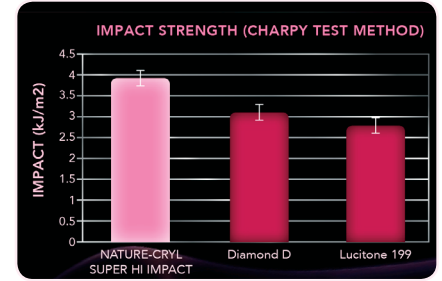

En 20 Minutos haces lo que quieras


NATURE-CRYL™ HI-20ET

Acrílico para Base de Prótesis de Curado Rápido



Este material extremadamente versátil cumple con los requerimientos de materiales para bases de dentaduras ISO 1567 Tipo 1 Clase 1 y excede el umbral del ISO 1567 en resistencia al alto impacto. NATURE-CRYL™ HI-20ET con su ciclo de curado de 20 minutos hace su uso conveniente y secciones de dentaduras (de hasta 8.5 mm) pueden ser procesadas sin porosidad exotérmica. Este material de base para dentaduras también puede ser procesado usando los ciclos convencionales de curado de 2 horas o de toda la noche y se puede mantener de un día para otro si se refrigera.

- Fuerza de Alto Impacto
- Curado de 20 Minutos
- Fácil de Terminar y Pulir
- Tiempo de Trabajo Extendido
- Ajuste Exacto
- Tipo 1 Clase 1

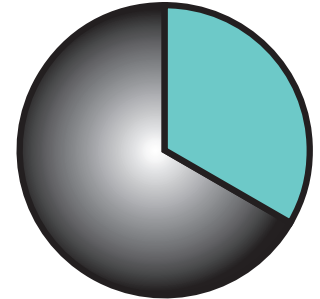

CURADO de 20 MINUTOS

Uso Universal Reparaciones Invisibles


NATURE-CRYL™ POUR

Acrílico para Base de Prótesis de Autocurado



NATURE-CRYL™ POUR es usado para procesar dentaduras completas o parciales y también puede ser utilizado como material de rebase y para reparaciones. Cumple con los requerimientos de material de base para dentadura ISO 1567 Tipo 2 Clase 2. El versátil material NATURE-CRYL™ POUR es el producto ideal para la técnica de resina de flujo. Y como logra igualar perfectamente todas las tonalidades del sistema NATURE-CRYL™, es la resina perfecta para todas las reparaciones de dentadura de todo el sistema NATURE-CRYL™.

- Usado con Pour-N-Flask
- No Requiere Yeso Piedra
- Uso Universal
- Fabricar Aparatos Ortodónticos
- Protectores Bucales y Retenedores
- Tipo 2 Clase 2

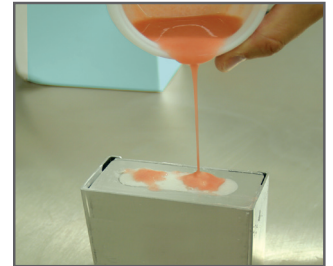

¿Qué Onda... esto de Microonda?

NATURE-CRYL™ MC

Acrílico para Base de Prótesis de Curado en Microonda



NATURE-CRYL™ MC es una resina de acrílico para dentadura creada específicamente para ser curada en horno de microondas. Este material cumple con los requerimientos para material de base de dentaduras ISO 1567 Tipo 5. Ahora solamente 3 minutos y un horno de microondas estándar de 500 watts es todo lo que usted necesita para curar dentaduras más precisas y de alta calidad.

- Rápido Curado de 3 Minutos
- No Burbujas ni Porosidad
- Ajuste Exacto
- Excelentes Propiedades
- Baja Absorción de Agua
- Tipo 5

