




Crea tu Mundo con Initial de GC

El sistema cerámico para cada indicación

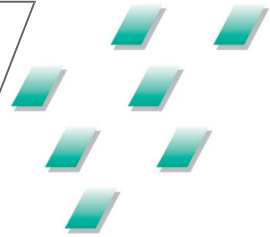

Tonos de Encía

Sets de Tonos:

- GC Initial MC
- GC Initial Zr



initial

GC Initial

El sistema cerámico GC Initial es una línea de seis cerámicas especializadas con las cuales se pueden crear restauraciones libres de metal o metal-cerámicas usando cualquier proceso de fabricación y sobre cualquier estructura de trabajo.

La restauración gingival es ahora natural y estética gracias a la alta calidad de tonalidades que ofrecen los sets complementarios de tonos de encía. Estos sets reúnen todos los requerimientos para alcanzar una reproducción gingival estética sin límites a la creatividad.



GC
GC AMERICA INC.

info@gclatinamerica.com

www.gclatinamerica.com



Set de Tonos de Encías

• GC Initial MC • GC Initial Zr

Debido a que la demanda de super estructuras estéticas crece continuamente los técnicos dentales tienen la necesidad para las zonas de tejido blando utilizar cerámicas que puedan ser caracterizadas individualmente.

La transición natural corona-gingival, se logra con los tres modos de fácil uso de Sets de Tonos de Encía de GC Initial.

En las técnicas de trabajo de puentes, coronas y superestructuras los nuevos materiales coloreados de gingival fueron diseñados para cumplir con todos los requisitos. Al mismo tiempo siguen el concepto ya establecido de GC Initial "Un sistema de tonos, una técnica de aplicación".

Procesos Perfectos

Aspecto Natural

Cualquier característica gingival tan específica como se requiera, puede ser perfectamente producida con los cinco tonos de gingival similares y combinables.

En la misma forma que en las técnicas de enchapado, los pasos individuales pueden ser fácilmente divididos entre diferentes cociones dependiendo cada necesidad y cada método de trabajo.

Set de Tonos de Encía MC

Pasta Opaca

Polvo Opaco

Tanto en pasta como en polvo están disponibles en cinco tonos: base clara, base oscura, violeta intenso, crema intenso y rojo intenso.



Set de Tonos De Encía Zr

El set de tonos de encía contiene el modificador estructural Zr FM-5 en lugar del material opaco.

Por supuesto, todos los tonos de encía están disponibles también por separado.

Especificaciones Técnicas

Propiedades	GC Initial MC	GC Initial Zr
Cocción de la Dentina (°C)	890	810
CTE(25-500°C; 10 ⁻⁶ xK ⁻¹)	2da / 4ta cocción 13.9/6.9	2da / 4ta cocción 9.4/9.4
Temp.de Cambio de Vidrio (°C)	575	550
Solubilidad (µg/cm ²)	25	12
Densidad (g/cm ³)	2.52	2.43
Resistencia a la Flexión (Mpa)	50	90
Medida de Partícula (µm; D 50%)	25	21.5

initial