

GC Fuji IX GP y GC Fuji IX GP FAST

100 millones de restauraciones se han elaborado mundialmente, ésto hace, que sea el restaurador de ionómero de vidrio ESTANDAR DE ORO



GC Fuji IX GP

Cápsulas: Envase de 50 (volumen mínimo por cápsula: 0.12ml)

Polvo - líquido: 1-1 envase con 15g polvo y 6.4ml líquido

Reposiciones: frasco de 15g polvo, frasco de 6.4ml líquido

Colores disponibles VITA : A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

GC Fuji IX GP FAST

Cápsulas: Envase de 50 (volumen mínimo por cápsula: 0.12ml)

Colores disponibles VITA : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Accesorios para mejores resultados

Para ayudar a

la extrusión: GC Aplicador de capsulas

Para aumentar

la adhesión: GC Acondicionador de cavidad y GC Acondicionador de dentina

Para prevenir la

deshidratación: Fuji Coat LC o Fuji Varnish

PROPIEDADES FÍSICAS	GC Fuji IX GP FAST	GC Fuji IX GP
Porción polvo/líquido g/g	0.36/0.10	0.35/0.10
Tiempo de mezcla	10"	10"
Tiempo de trabajo	1' 15"	2'00"
Acabado	3'00"	6'00"
Resistencia a la compresión*	268 MPa	220 MPa
Resistencia diametral*	23 MPa	22 MPa
Adhesión al esmalte de bovina *	6.9 MPa	5.9 MPa
Adhesión a la dentina de bovina *	5.8 MPa	4.4 MPa
Solubilidad en el agua	0.02%	0.02%
Solubilidad en ácidos lácteos	0.21%	0.21%
Dureza de la superficie (Vickers)*	74	74
Radio-opaco	Sí	Sí

* después de 24 horas

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
E-mail info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC
FIRST IS QUALITY



GC Fuji IX GP *FAST*
Restaurador de Ionómero de vidrio

9 razones, porqué éste
es su selección No 1

GC
FIRST IS QUALITY

GC Fuji IX GP y el

El Ionómero de vidrio de e

GC Fuji IX GP
ha sido
diseñado
para
ofrecerle lo
mejor en
todo, y aquí
el porqué el
GC Fuji IX GP
es su
selección
No 1:




1. DE MÚLTIPLE PROPÓSITOS

- Rellenos posteriores permanentes y temporales
- Ideal para pacientes geriátricos y pediátricos
- Reconstitución de muñones, base o fondo de cavidad
- Técnica de sandwich, como reemplazo de la dentina



2. RÁPIDO Y FÁCIL DE COLOCAR

- Consistencia no-pegajosa que permite una adaptación exacta a las cavidades para un óptimo sellado adhesivo
- Permite obturar en un sólo paso, incluso hasta en cavidades grandes
- Selección del tiempo de fraguado
 - 6 minutos con el GC Fuji IX GP de "fraguado normal"
 - 3 minutos con el GC Fuji IX GP FAST de "fraguado rápido"
- Disponible en cápsulas listas para mezclar para uso instantáneo

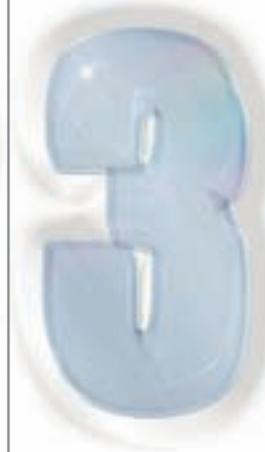


3. UNIÓN QUÍMICA FUERTE

- Superficie brillante, húmeda después de mezclar, es único del GC Fuji IX, muestra visibilidad, con suficientes iones de ácido poliacrílico disponible para un cambio efectivo e inmediato de iones, entre la dentina, el esmalte y el GC Fuji IX
- Sin autograbado, adhesivo o fotocuración
- Sin secar o diques de goma



4. TRABAJOS DE LARGA DURACIÓN

- Restauraciones con alta resistencia a la compresión y alta dureza de superficie
- Propiedades físicas de absorción de estrés, que le da una mayor durabilidad

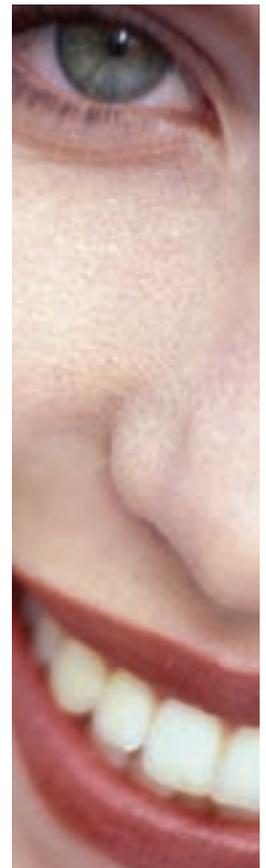

GC Fuji IX GP FAST

el estándar de oro



5. SIN MICROFILTRACIÓN

- La adaptación completa de los márgenes ayuda a asegurar un perfecto sellado químico a prueba de bacterias
- Alta adhesión química con flexibilidad, lo que significa que el sellado permanece bien cerrado y es de larga duración




6. PROTECCIÓN DE FLUORURO

- Alta liberación de fluoruro en la cavidad, dando extra protección



7. DE USO SEGURO

- Puede ser tolerado por pacientes, que tengan, o que puedan tener sensibilidad a metales o resinas de monómeros.

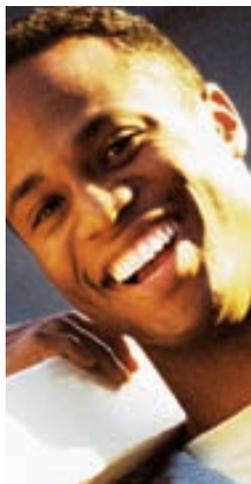

8. EXTENSAMENTE COMPROBADO

- Asesorado en más de 200 artículos, essays y publicaciones
- Lista actualizada con referencias disponible en el sitio web



9. STANDARD DE ORO

- Sus magníficas propiedades, e incomparablemente comprobado y la experiencia ha convertido al GC Fuji IX GP, en el restaurador de ionómero de vidrio con menos riesgo, con "standard de oro"
- El GC Fuji IX GP ha superado la meta que otros ionómeros de vidrio tratan de alcanzar.



y
más
de

1000

millones de
razones ...

- Su uso en los trabajos rutinarios para más de 100 millones de restauraciones mundialmente, comprueba que el GC Fuji IX GP cumple lo que promete, tanto para los pacientes como para los dentistas.

¿Se podría usted dar el lujo de usar algo inferior?