



40 años de avances en impresiones precisas

EXA Advanced™
de GC

Material de impresión
de silicona de adición



EXA Advanced
Regular
Fraguado normal

138500



EXA Advanced
Regular
Fraguado rápido

138100



EXA Advanced
Injection
Fraguado normal

138700



EXA Advanced
Injection
Fraguado rápido

138300

GC

La calidad de una marca EXA

Rigidez y elasticidad en perfecto equilibrio para resultados óptimos

Resistente a desgarros para una reproducción precisa de los márgenes de preparación más finos.

Hidrófilo para captar todos los detalles necesarios para una reproducción precisa



Elasticidad, buen olor y sabor del material para la mejor comodidad posible, tanto para pacientes como para profesionales

Se recupera totalmente de la deformación que se produce al retirarse de la boca del paciente.

Mantiene su precisión durante los días de almacenamiento y transporte, gracias a su excelente estabilidad dimensional

Imagen: cortesía del Dr. David Gestakovski, Croacia

Resistencia a desgarros mejorada*

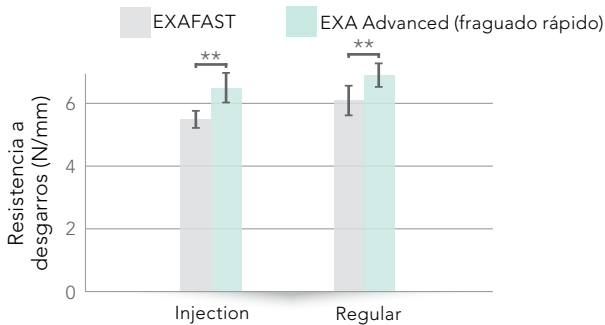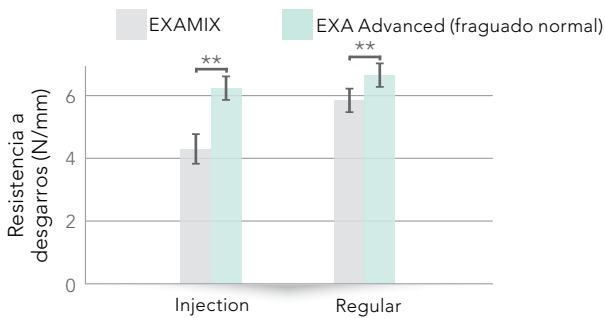

**p<0.05

Tiempos de trabajo y fraguado

	Tiempo de trabajo a 23 °C	Tiempo de fraguado intraoral
EXA Advanced Fraguado normal (Injection & Regular)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Fraguado rápido (Injection & Regular)	1'00"	1'30"

Guía de uso de la técnica

Técnica	Injection	Regular
Dos pasos, dos materiales	Masilla (Putty) + Inyección Como material wash (fluido) con EXAFAST o EXAFLEX Putty	Masilla (Putty) + Normal Como material wash (fluido) con EXAFAST o EXAFLEX Putty
Un paso, dos materiales	Putty + Inyección Como material wash (fluido) con EXAFAST Putty	Putty + Regular Como material wash (fluido) con EXAFAST Putty

*En comparación con EXAMIX y EXAFAST

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC IBÉRICA
 Dental Products, S.L.
 Edificio Codesa 2
 Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
 ES-28290 Las Rozas, Madrid
 Tel. +34.916.364.340
 Fax. +34.916.364.341
 comercial.spain@gc.dental
<https://europe.gc.dental/es-ES>



Since 1921
 100 years of Quality in Dental